


DELOVI:

- 1 Upravljač za izbor grejanja i masaže
- 2 Dugme za funkciju grejanja
- 3 Dugme za izbor masaže
- 4 Masažno sedište
- 5 Šijacu masažni motori
- 6 Crveno svetlo sa grejanjem

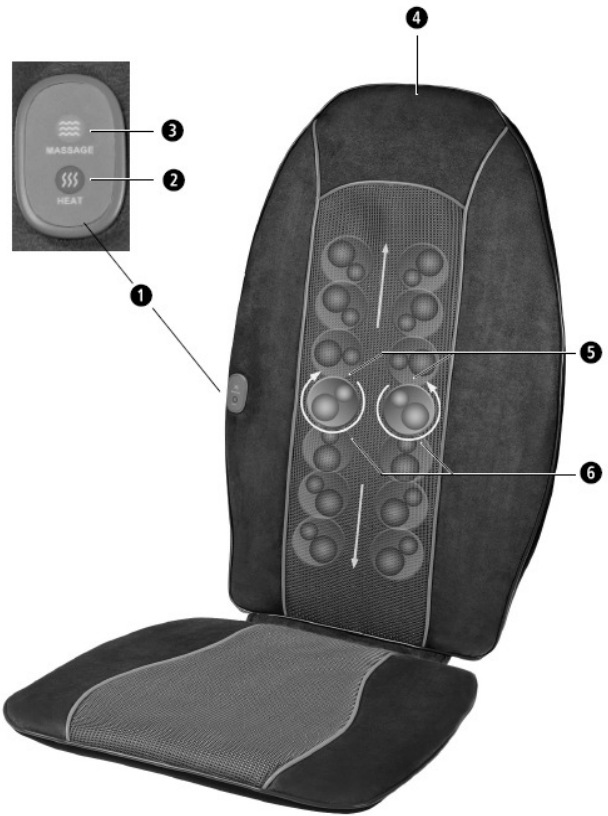

Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, a pogotovo deo sa sigurnosnim uputstvima i čuvajte uputstvo za upotrebu. Ukoliko nekome poklonite ovaj proizvod, obavezno mu dajte i uputstvo.

SIMBOLI



Pažljivo pročitajte uputstvo, da ne bi došlo do povrede ili štete na uređaju.



UPOZORENJE Ovaj simbol upozorava na mogućnost povrede korisnika ukoliko se ne pridržavate uputstva.



OPREZ Ovaj simbol upozorava na mogućnost nastanka štete na uređaju.



OBAVEŠTENJE Ovaj simbol označava dodatne korisne informacije vezane za upotrebu.



II kategorija zaštite **LOT** Broj lota Oznaka proizvođača



SIGURNOSNA UPUTSTVA

Uputstva vezana za uključivanje u struju

• Pre nego što uključite masažer u struju proverite da li je uređaj isključen i da li su voltaža mreže i dozvoljena voltaža za korišćenje proizvoda iste. • Vodite računa da je priključak za struju lako dostupan kada je uređaj uključen u struju. • Kabl uključite u struju samo kada je masažer isključen. • Držite kabl za struju i masažer dalje od toplote, toplih površina, vlage i tečnosti. Ne dodirujete utikač mokrim rukama. • Ne dodirujete uređaj ako je upao u vodu. Isključite ga odmah iz struje. • Odmah nakon upotrebe isključite masažer iz struje. • Nikada ne vucite kabl da biste isključili masažer, već izvucite utikač iz struje. • Nikad nemojte nositi, vući ili okretati masažer za kabl. • Uređaj nemojte koristiti ukoliko je došlo do oštećenja kabla. Iz sigurnosnih razloga ove delove treba zameniti samo u ovalšćenom servisu. Kako biste sprečili štetu, uvek pošaljite oštećeni deo u ovlašćeni servis. • Vodite računa da kabl nije tako postavljen da neko može da se saplete. Kabl ne sme biti uvrnut, zaglavljnjen ili upleten.

Uputstva vezana za specifične grupe ljudi

• Masažer nije dizajniran za korišćenje kod osoba sa ograničenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima (uključujući i decu), kao i osobe koje nemaju dovoljno iskustva i / ili znanja, osim ako su pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost, ili ako su obučene za korišćenje uređaja. • Ako deca koriste masažer uvek moraju biti pod nadzorom odrasle osobe, kako ne bi koristila masažer za igranje. • Ne koristite masažer kao dodatak ili da biste zamenili terapiju koju Vam je lekar prepisao. Hronične bolesti i simptomi se mogu u tom slučaju pogoršati. • Sedište za masažu ne treba da koristite ili se pre upotrebe konsultujete sa lekarom ako: * ste u drugom stanju, * koristite pacemaker, imate veštačke zglobove ili elektronske implante, * patite od sledećih bolesti: problemi sa cirkulacijom, oboljenja vena, otvorenih rana, modrica, oštećene kože, upale vena. • Ne koristite masažer u blizini očiju ili bilo kog osetljivog dela tela. • Površina masažera je topla. Osobe koje su neosetljive na toplotu moraju biti oprezne prilikom korišćenja masažera. • Ukoliko osetite bilo kakvu bol ili neprijatnost tokom masaže, odmah prestanite sa korišćenjem i konsultujete se sa Vašim lekarom. • Ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezanih za terapeutsku primenu masažera konsultujete se sa Vašim lekarom. • Ukoliko imate neobjašnjive bolove, ako primete terapiju i / ili koristite medicinska pomagala, konsultujete se sa Vašim lekarom pre korišćenja.

Pre korišćenja

• Uvek pažljivo pregledajte kabl, upravljač i masažer pre upotrebe. Ukoliko primetite bilo kakva oštećenja ne pokušavajte da ga koristite. • Ne koristite masažer ukoliko primetite vidljiva oštećenja na masažeru i kابلu, ako masažer ne radi kako treba ili je pao na pod ili se nakvasio. U slučaju bilo kakvog kvara obratite se uvozniku.

Korišćenje masažera

• Masažer koristite samo za to predviđenu namenu kao što je opisano u ovom uputstvu za upotrebu. • Korišćenje masažera za bilo koju drugu namenu poništava garanciju. • Nikada ne ostavljajte uključen masažer bez nadzora. • **Maksimalno vreme korišćenja po jednom tretmanu je 15 minuta.** • Vodite računa da masažer ne dođe u kontakt sa šiljatim i oštrim predmetima. • Nemojte koristiti masažer u blizini visokofrekventnih elektromagnetnih izvora. • Ne stavljajte masažer blizu električnog šporeta ili nekog drugog izvora toplote. • Nemojte koristiti masažer ukoliko je presavijen ili zgužvan. • Nemojte stajati punom težinom na masažeru. • Ne dodirajte napajanje dok stojite u vodi i priključak za struju uvek držite suvim rukama. • Masažer koristiti preko odeće.



Masažer je namenjen samo za kućnu upotrebu i ne sme se koristiti u komercijalne ili medicinske svrhe. Ukoliko imate bilo kakve sumnje konsultujete se sa Vašim lekarom.



Masažer koristite samo u zatvorenom prostoru ili u automobilu.



Masažer ne koristite u vlažnim prostorijama (npr. za vreme tuširanja ili kupanja).

Održavanje i čišćenje

• Masažer ne zahteva održavanje. • Masažer možete jedino sami čistiti. Ukoliko dođe do bilo kakvog kvara, ne pokušavajte sami da popravite masažer, jer u tom slučaju gubite pravo na garanciju, a može doći i do ozbiljnih nezgoda (požar, električni šok, povrede). Za sve popravke obratite se uvozniku. • Masažer nemojte potapati u vodu ili bilo koju drugu tečnost. • Ukoliko tečnost ipak prođe u uređaj, odmah ga isključite iz struje.



Nemojte prati masažer. Nemojte nositi na hemijsko čišćenje.

Pakovanje

Proverite da li ste dobili kompletno pakovanje koje ni na koji način nije oštećeno. Ukoliko postoji bilo kakva sumnja u ispravnost masažera nemojte koristiti uređaj i kontaktirajte odmah uvoznika.

Pakovanje sadrži: 1 Ecomed šijacu sedište za masažu MC-90E i uputstvo za upotrebu.

Kontaktirajte prodavca ukoliko uočite neka oštećenja prilikom otvaranja uređaja.

Šta je šijacu masaža?

Šijacu je vrsta masaže prstima i jedna je od najvažnijih vrsta masaže, zajedno sa ručnom limfnom drenažom i refleksologijom. Nežno „gladeње“ i blagotvoran pritisak su tehnike koje se koriste kako bi se probudila životna snaga i podstakla da protiče kroz telo. Cilj masaže nije samo opuštanje, već i postizanje optimalnog protoka životne snage radi harmonizacije duše i tela.

Priprema

• Postavite masažer **4** na željenu stolicu i pričvrstite ga koristeći trake za pričvršćivanje koje se nalaze sa zadnje strane. • Uključite utikač u struju. • Sedite na masažer **4** i upoznajte se sa funkcijama.

Kako radi Ecomed sedište za šijacu masažu?

U Ecomed šijacu sedištu za masažu nalazi se savremeni uređaj koji omogućava izvornu šijacu masažu. Ecomed šijacu sedište za masažu ima 2 rotacione masažne glave **5** za šijacu masažu celih leđa. Masažne glave se kreću odozgo ka dole i nazad. Masažer je i dodatno opremljen funkcijom za grejanje crvenim svetlom u masažnim glavama **6**. Jedinstvena kombinacija intenzivne šijacu masaže i isijavanje toplote čine masažu ovim masažerom delotvornom i opuštajućom. Funkciju grejanja u predelu leđa možete primeniti odvojeno ili zajedno sa funkcijom masaže. **Masažer će se automatski isključiti nakon 15 minuta rada** zahvaljujući ugrađenom tajmeru.

Funkcije na upravljaču **1**

Dugme za izbor masaže **3** :

Pritiskom na dugme za izbor masaže **3** prvi put, uključuje se šijacu masaža celih leđa. Zelena LED sijalica ispod ispod dugmeta će zasvetleti. Pritiskom na dugme za izbor masaže **3** drugi put, isključujete funkciju masaže.

Dugme za funkciju grejanja **2** :

Pritiskom na dugme za funkciju grejanja **2** prvi put, uključuje se funkcija grejanja crvenim svetlom i crvena LED sijalica ispod dugmeta će zasvetleti. Pritiskom na dugme za funkciju grejanja **2** drugi put, isključuje se funkcija grejanja crvenim svetlom.

UPOZORENJE Vodite računa da ne prekoračite maksimalno vreme trajanja masaže od 15 minuta.

Čišćenje i održavanje

• Pre nego što počnete sa čišćenjem isključite masažer i izvucite utikač iz struje. Pustite masažer da se dobro ohladi. • Masažer možete čistiti samo navlaženim sunđerom. Ni u kom slučaju nemojte koristiti oštre četke, agresivne deterdžente, razređivač, benzin ili alkohol. Istrljajte masažer suvom čistom krpom dok ga ne osušite. • Kada čistite masažer nikada ga nemojte potopiti u vodu i vodite računa da voda ne prodre u uređaj. • Sačekajte da se masažer potpuno osuši pre nego što ga ponovo koristite. • Razmrsite kabl ako se zapetlja. • Masažer bi bilo idealno da čuvate u njegovoj originalnoj kutiji na čistom i suvom mestu.

Odlaganje:



Ovaj proizvod ne može se baciti sa smećem iz domaćinstva. Svi korisnici moraju električne ili elektronske uređaje (bez obzira da li sadrže ili ne toksične supstance) baciti na za to predviđenim mestima. Kontaktirajte komunalnu službu ili ovlašćenog distributera radi dobijanja informacija o odlaganju.

Specifikacija

MODEL	Ecomed sedište za šijacu masažu MC-90E
IZVOR STRUJE	220 - 240 V~ 50 Hz
POTROŠNJA STRUJE	30W
VREME KORIŠĆENJA	max 15 minuta
USLOVI KORIŠĆENJA	samo u suvim prostorijama
USLOVI SKLADIŠTENJA	na hladnom suvom mestu
DIMENZIJE	približno 58 x 46 cm
TEŽINA	približno 3,2 kg
DUŽINA KABLA ZA STRUJU	približno 1,75 m
ARTIKAL BROJ	23305
EAN KOD	40 15588 23305 0



Zadržavamo pravo da promenimo tehničke i dizajnerske karakteristike, kao deo našeg konstantnog procesa unapređenja proizvoda.

Ovlašćeni uvoznik i distributer za Srbiju:

VANA d.o.o. Beograd, Stevana Brakusa 6, tel: 011/7544-533

e-mail: vanabgd@sezampro.rs, www.vana.co.rs